

Appareil de détoxination « celldetox »

Art. 099

ASSISTANCE TELEPHONIQUE « MISE EN FONCTIONNEMENT » GRATUITE



Vous désirez rester jeunes et profiter pleinement de la vie ?

Malgré le stress et la pollution vous désirez être en bonne santé ?

Est-ce que c'est possible dans notre société industrielle où sous la pression du stress notre corps se charge de plus en plus en toxines et perd la capacité à se nettoyer ?

Intervenir avant que ce ne soit pas trop tard. Une détoxination...Une purification...
Changement de mode de vie, une vie saine et naturelle...

Nous pouvons aider le corps à éliminer ces substances nocives sans frustration, sans douleurs, de façon agréable...De façon consciente, ce qui va transformer notre vie, rendre notre corps plus léger et juvénile.

Merci d'avoir choisit notre appareil « celldetox »

C'est un appareil de détoxination ionisante.

Par ce processus les cellules électriquement chargées sont de nouveau bien oxygénées ce qui aide l'auto régénération des cellules.

Comment cela fonctionne-t-il ?

IONISATION

Une molécule d'eau est composée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Lorsque la molécule perd un atome d'hydrogène la molécule restante OH prend une charge négative. Lorsque vous marchez le long d'une plage, votre corps absorbe des millions d'ions de charge négative lesquels alcalisent le sang et les tissus.

A cause d'une nourriture non équilibrée et d'un stress important, nous avons tendance à accumuler et conserver des quantités excessives d'éléments négatifs nuisibles à notre bien être: lactiques, pyruviques, uriques, carboniques, acétiques, butyriques, acide-hépatiques, di acétiques etc....

UTILISATION

Les praticiens dans le domaine du bien-être et les patients ont tous reconnu beaucoup d'effets positifs suite à des séances de détoxination :

1. PLUS DE SOUPLESSE DANS LES ARTICULATIONS
2. SOULAGEMENT DES DOULEURS DUES A L'ARTHRITE
3. MEILLEUR SOMMEIL
4. UNE AUGMENTATION PALPABLE DE L'ENERGIE
5. UNE VERITABLE SENSATION DE BIEN ETRE

MODE D'EMPLOI

1. Pour commencer:

- Branchez le cordon d'alimentation,
- L'électrode
- Le bracelet dans les prises prévues à cet effet (aucun risque d'erreur puisque aucune prise n'est semblable).
- Ensuite mettez l'électrode dans un récipient rempli d'eau (électrode doit être bien couverte par l'eau),
- Mettez le bracelet,
- Mettez vos pieds dans l'eau et seulement ensuite allumez l'appareil – appuyez sur le l'interrupteur rouge situé à l'arrière.
- Choisissez le mode de votre session en appuyant sur la touche « MODE ». Cet appareil dispose de CINQ MODES – PROGRAMMES.
- Pour commencer la procédure appuyez sur « START »

LES CINQ PROGRAMMES

PROGRAMME UN – fonction accessible et recommandée pour la majorité de personnes. L'appareil (en MODE UN) est programmé par défaut afin d'établir un équilibre entre le positif et le négatif lequel convient à la plupart des personnes n'ayant aucune connaissance spécifique dans le domaine de la santé. Le temps programmé par défaut est de 60 min. Vous pouvez le modifier en utilisant les boutons « - » ou « + ». Pensez à le faire avant le début de la session. Vous pouvez quand même arrêter la procédure en cours en appuyant sur le bouton « STOP ».

PROGRAMME DEUX - toute la session est POSITIVE. Le temps programmé par défaut est de 60 min. Pour augmenter le PH. Recommandé pour des personnes dont le PH est trop acide.

PROGRAMME TROIS – toute la session est NEGATIVE. Le temps programmé par défaut est également de 60 min. Pour éliminer les additifs, certains métaux lourds et pour descendre un PH trop alcalin.

PROGRAMME QUATRE – la session est de 15 min positive, ensuite 10 min négative et les 5 dernières minutes positive. Pour relever et rééquilibrer un PH un peu acide.

PROGRAMME CINQ – la session est de 10 min négative ensuite 15 min positive et les 5 dernières minutes négative. Pour rééquilibrer un PH un peu alcalin.

Les quatre derniers modes sont prévus et adaptés pour être utilisé par un personnel avisé qui a la possibilité de tester.

– TEST MUSCULAIRE (kinésiologie) OU TEST PH (bandelettes disponibles en pharmacie)

Si vous le désirez, vous pouvez utiliser la ceinture infrarouge.

Branchez à l'appareil.

Mettez autour de votre taille, appuyez sur l'interrupteur de marche situé au dessus de l'appareil à droite et ensuite réglez l'intensité avec les boutons « + » ou « - » section « Far Infrared Ray »

ATTENTION

1. Soyez prudent et ne touchez pas l'appareil avec des mains mouillées.
 2. Ne pas laisser tomber l'appareil
 3. N'utilisez pas de produits chimiques pour le nettoyer.
 4. Appuyez avec précaution sur les touches pour préserver la longévité de la machine.
- L'appareil doit être installé correctement sans risque de tomber dans l'eau.

DEPANNAGE

Dysfonctionnement : Technicien

Sur écran pas d'affichage : Vérifiez le cordon d'alimentation et le fusible

L'électrode ne fonctionne pas : Remettre l'électrode après avoir vérifié l'alimentation

Aucune réponse quand vous appuyez sur les boutons :

Arrêtez l'appareil pendant 10 secondes et redémarrez

CONTENU :

- 1 Unité de base
- 1 câble
- 1 mode d'emploi
- 2 bobines (cathode)
- 1 bracelet (anode)
- 1 ceinture thérapeutique infrarouge bambous

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Cet appareil peut être utilisé par des personnes de tout âge. Dans notre famille il est utilisé des personnes de 16 à 89 ans ! Les séances se passeront bien si les instructions sont suivies soigneusement. Cependant le temps de session et l'intensité varie selon chaque personne. . Vous pouvez le modifier en appuyant sur les touches « + » ou « - ».

Temps de session conseillé pour un adulte est de 30 min.

Temps de session conseillé pour un enfant de 8-10 ans – pas plus que 15 min sous la surveillance d'un adulte. Nombre de séance entre 6 et 10.

Pour les personnes âgées de moins de 50 ans nous recommandons une cure de 14 séances (une tous les 2 jours). Ensuite arrêter pendant 3 semaines avant de recommencer un traitement de 14 séances.

Les personnes âgées de plus de 50 ans peuvent utiliser l'appareil tous les 3 jours pour une cure de 14 séances. Puis arrêter pendant 4 semaines pour recommencer le même cycle.

Pour commencer il est nécessaire de faire un traitement de fond de 15 séances

Si les effets secondaires (fatigue, nausée, vertiges possibles) de la détoxination sont trop puissants, vous pouvez espacer les séances.

Ne pas utiliser trois jours de suite.

Ne pas utiliser deux fois par jour.

Après ce traitement de fond il n'y a pas vraiment de règles particulières mais suite à notre expérience nous vous recommandons de faire une séance par semaine pour laisser au corps le temps de bien assimiler les changements dans les cellules, dans les organes et aussi pour une meilleure adaptation sur un plan psychique et émotionnel.

Comme chacun est différent, observez bien les changements qui vont survenir lors des séances et les jours qui suivent pour adapter le rythme des sessions suivant ces données.

Il est possible, si on a un rythme de vie très stressant, de ressentir une détente, voir une fatigue après les premières séances. C'est un bon signe. Ne vous inquiétez pas si vous ressentez des perturbations émotionnelles. Cela indique que les toxines émotionnelles s'évacuent avec les toxines chimiques.

Utilisez de l'eau ordinaire surtout pas distillée ou adoucie

Toutes les qualités d'eau sont différentes. Il est nécessaire de bien s'habituer aux caractéristiques des eaux locales.

Les capacités conductrices sont liées à la qualité de l'eau et déterminent l'effet des ions et influencent la détoxination.

Ajoutez seulement une pincée de sel de temps en temps pour ajuster la conductivité de l'eau.

Ajouter du sel augmente la conductibilité de l'eau donc de la détoxination, Toujours veillez à ne pas dépasser les 2,5 Ampères

Si l'intensité (A) atteint 1,5 ou inférieur, ajoutez une pincée de sel.

Mais pour préserver la vie de l'électrode et de l'appareil, évitez d'ajouter trop de sel.

Après quelques séances on maîtrise parfaitement l'ajout de sel

L'électrode a besoin d'être nettoyée après chaque utilisation (trempage environ 20 min dans le vinaigre blanc ou du bicarbonate suivi d'un bon rinçage).

Les couleurs de l'eau

On est surtout très impressionné par les couleurs et les substances qui se dégagent dans l'eau pendant la détoxination ionique. La combinaison de l'eau, du métal et du sel produira des couleurs différentes et quelques substances, même si les pieds ne sont pas dans l'eau.

Certaines colorations de l'eau peuvent être dues aux substances toxiques, métaux lourds, additifs etc., que notre corps a emmagasinés. Mais rester toujours prudent par rapport aux interprétations !

Nous vous proposons une liste de la coloration d'eau puisque nous connaissons l'intérêt de tous les gens pour ce phénomène, mais c'est juste à titre indicatif, ne pas se focaliser dessus.

-Noir

Détoxination dans la région du foie

-Particules noires

Résidus de Métaux lourds (non assimilables par l'organisme)

-Brun -

Détoxination dans la région du foie, débris de goudron, tabac

-Vert foncé

Détoxination dans la région de la vésicule biliaire

-Orange

Détoxination dans la région des articulations

-Particules rouges

Résidus qui peuvent être dus à d'anciens caillots sanguins

-Particules blanches

Levures ou résidus pouvant provenir des produits laitiers

-Écume blanche

Détoxination dans la région du système lymphatique

-Jaune-vert

Détoxination des reins, vessie, conduits urinaires et région de la prostate

CONTRE-INDICATIONS

Il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil de détoxination pour certaines personnes :

Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque (pacemaker);

Les personnes qui ont reçu une transplantation d'organe;

Les femmes enceintes ou qui allaitent;

Les personnes qui ont des blessures ouvertes sur les pieds;

Les personnes qui souffrent d'épilepsie;

Les personnes qui prennent des médicaments indispensables au maintien de la vie.

LA CEINTURE DE BAMBOU INFRAROUGE,

NE PAS METTRE DIRECTEMENT SUR LA PEAU

Elle est attachée à notre taille et fait également partie des accessoires de l'appareil et nous chauffe en émettant des infrarouges, stimulant ainsi les organes de sécrétion (foie, pancréas, rate).

L'évacuation des substances toxiques est adéquate et non violente sous l'influence de l'augmentation du niveau ionique dans le corps ; c'est pour cette raison, qu'il n'y a pas de contre-indication.

L'appareil stimule exclusivement les fonctions de sécrétion naturelle du corps, il stimule l'évacuation des poisons et d'autres résidus.

Le traitement ne permet pas à notre organisme d'éliminer les substances importantes telles les vitamines, les minéraux, la nourriture ou les médicaments absorbés non assimilés.

Il ne faut donc pas avoir peur que ce traitement nous supprime les vitamines et les minéraux indispensables à l'existence, il peut être, en outre, appliqué dans toute thérapie.


BIENFAITS DES INFRAROUGES

- Sensation de notre bien-être général
 - Stimule la micro circulation
 - Augmente le transport de l'oxygène et de la nourriture dans les cellules sanguines au tissu de l'organisme ;
 - Aide au fonctionnement des globules blancs ; de ce fait, elle stimule les réactions de l'immunité et l'évacuation des pathogènes et des résidus cellulaires
 - La thérapie infrarouge s'inscrit aux méthodes des thérapies lumières, elle diminue sensiblement la douleur dans notre organisme sans effets secondaires
- Stimule la circulation sanguine
- Neutralise les effets des champs magnétiques nuisibles ;
 - Le celldetox- un outil de confort d'équilibre et de bien-être, qui peut vous aider de manière complémentaire pour corriger certains troubles

BENEFICES POTENTIELS DU « CELLDETOX »

- Élimination des déchets du corps pouvant être une cause de problèmes de ralentissement du métabolisme
- Peut aider à faire disparaître des problèmes de peau.
- Désactivation des virus, bactéries, levures et champignons (se développent avec difficulté dans une solution ionique)
- Effets bénéfiques sur la perte de poids
- Soulagement des maux de tête
- Amélioration de l'échange cellulaire
- Élimination des métaux lourds (non assimilable), que l'on retrouve dans l'analyse des boues résultant du bain
- Augmentation de la vitalité générale de notre corps
- Aide à soulager les douleurs et les tensions
- Meilleure qualité de sommeil
- Réduction des inflammations et de la rétention d'eau
- Sans contre indication pour les enfants de huit ans et plus

Operating Panel:

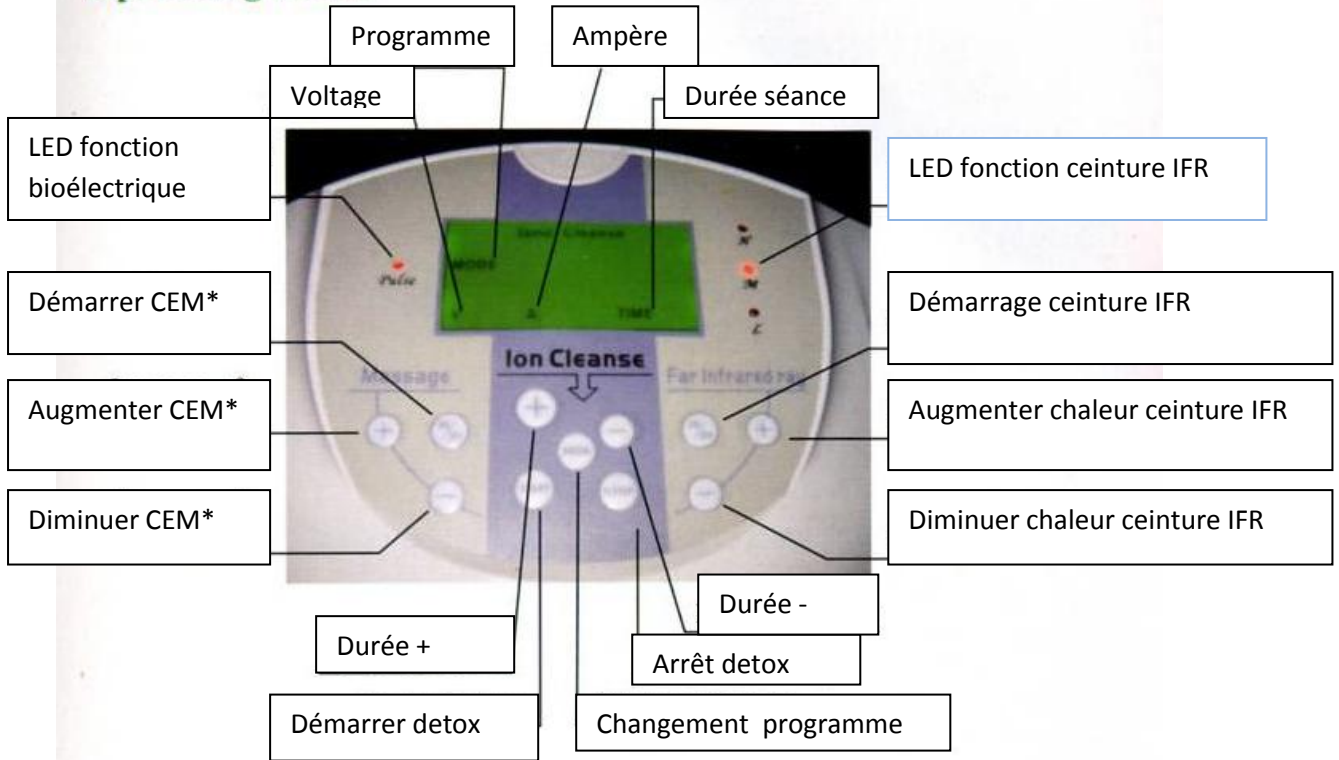

*Champs électromagnétiques pulsés – ATTENTION – UTILISER LES CEMP HORS LES SEANCES DE DETOXINATION-IONISATION